




Meditech Europe

Instrukcja obsługi

Swing Zapper (Base / Complete / Pulse)

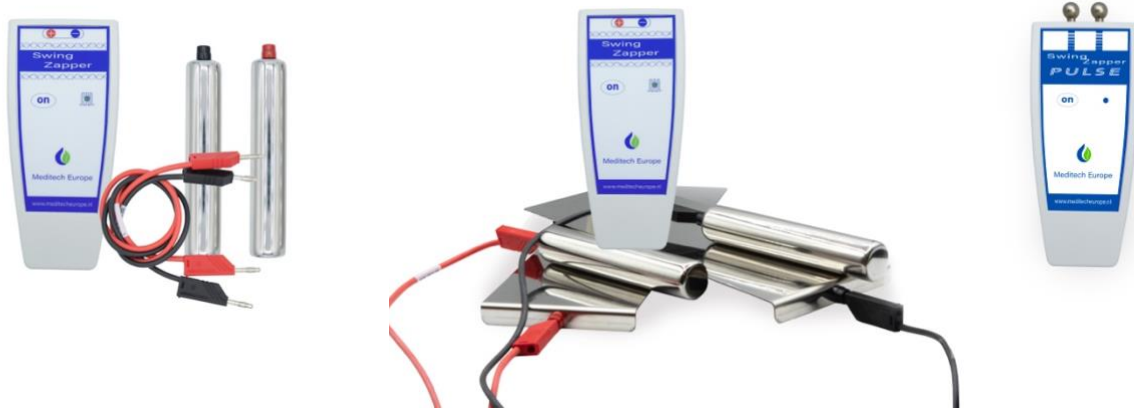

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Wersja PL V2 2024/04



Meditech Europe

Live in Harmony

Dane projektu : listopad 2023

Nazwa handlowa : Meditech Europe B.V.
Nazwa produktu : Swing Zapper
Model : Base, Complete, Pulse
Moc : 3 V (2x bateria 1,5 V)

Producent : Meditech Europe B.V.
Autor : J.K

Adres : Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Holandia
Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

VAT NL859592480B01

Indeks wersji : V2
Data wersji : 2024/04



Spis treści

1	O Instrukcji obsługi	5
1.1	Informacje ogólne	5
1.2	Znaki ostrzegawcze	5
2	Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	6
2.1	Zasady	6
2.2	Przeznaczenie	6
2.3	Wybór i kwalifikacje personelu	6
2.4	Wymogi bezpieczeństwa	7
2.5	Działania w sytuacjach kryzysowych	7
3	Zakres dostawy	8
4	Opis techniczny	9
4.1	Zestawienie	9
4.2	Tabliczka znamionowa	9
5	Transport	10
5.1	Przed transportem	10
5.2	Transport urządzenia	10
5.3	Wypakowywanie urządzenia	10
6	Obsługa urządzenia	11
6.1	Obsługa urządzenia	11
6.2	Wymiana baterii	11
7	Wsparcie w przypadku zakłóceń	12
8	Wycofanie z użytku	13
8.1	Utylizacja i recykling	13



9	Gwarancja.....	14
10	Deklaracja zgodności CE.....	15



1 O Instrukcji obsługi

Przed pierwszym użyciem urządzenia Swing Zapper lub przed przystąpieniem do wykonywania na nim czynności przez uprawnionego technika prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Meditech Europe.

Szczególną uwagę prosimy poświęcić rozdziałowi 2 „Ogólne instrukcje bezpieczeństwa”.

1.1 Informacje ogólne

Instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają na celu zapoznanie użytkownika z urządzeniem Swing Zapper i umożliwienie jak najbardziej optymalnego wykorzystania jego możliwości.

Instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia Swing Zapper. Dzięki temu:

- Unika się zagrożeń
- Unika się kosztów napraw i awarii produktu
- Zwiększa się niezawodność i żywotność produktu

Każda osoba uprawniona do wykonywania czynności z użyciem urządzenia Swing Zapper, która ukończyła 18 lat, musi zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i stosować się do jej zaleceń.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać także przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska, które obowiązują w danym kraju i miejscu użytkowania.

1.2 Znaki ostrzegawcze



Promieniowanie niejonizujące

Oznacza to, że urządzenie emituje promieniowanie o niskiej energii i niskich częstotliwościach radiowych.



2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

2.1 Zasady

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Meditech Europe.

Nie otwieraj urządzenia Swing Zapper. Czynność ta może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika Meditech Europe. Otwarcie urządzenia przez osobę inną niż wykwalifikowany pracownik Meditech Europe skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Nigdy nie używaj urządzenia Swing Zapper w wilgotnych pomieszczeniach, jak np. łazienka. Unikaj bardzo wysokich i niskich temperatur.

Swing Zapper to urządzenie wytwarzające częstotliwości. Nie jest on wyrobem medycznym. Korzystanie z urządzenia Swing Zapper nie daje żadnych podstaw do dochodzenia praw ani roszczeń. Użytkownik korzysta z urządzenia Swing Zapper na własne ryzyko i na własny koszt.

Czyszczenie urządzenia Swing Zapper: użyj suchej ściereczki. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń można użyć wilgotnej ściereczki. Upewnij się, że gniazdo baterii nie ulega zamoczeniu.

W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z urządzenia Swing Zapper skontaktuj się z Meditech Europe BV pod numerem telefonu: 0031 (0)527 292331 lub przez adres e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie, nieprawidłowe użytkowanie lub jakiegokolwiek szkody wynikłe z użytkowania w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji. Wszelkie spory rozstrzygane będą zgodnie z prawem holenderskim.

2.2 Przeznaczenie

Swing Zapper to urządzenie wytwarzające częstotliwości.

2.3 Wybór i kwalifikacje personelu

Urządzenie Swing Zapper wyprodukowano dla Meditech Europe w Emmeloord (NL). Meditech Europe korzysta wyłącznie z usług kompetentnych i certyfikowanych producentów.



2.4 Wymogi bezpieczeństwa

Nie używaj urządzenia Swing Zapper, jeśli jesteś w ciąży. Nie używaj urządzenia Swing Zapper także w przypadku posiadania rozrusznika serca, wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD) lub pompy insulinowej.

Z urządzenia Swing Zapper zawsze należy korzystać w suchym pomieszczeniu.

Upewnij się, że urządzenie Swing Zapper nie ma kontaktu ze źródłami ciepła, jak np. kominki, kuchenki gazowe, otwarty płomień itp.

Jeśli produkt jest uszkodzony, należy go przekazać do naprawy firmie Meditech Europe.

2.5 Działania w sytuacjach kryzysowych

W przypadku wybuchu pożaru użyj gaśnicy odpowiedniej dla sprzętu elektronicznego.



3 Zakres dostawy

1x Swing Zapper

2x AA baterie

Dostępne są różne modele. Zdjęcia różnych modeli znajdują się na stronie internetowej Meditech Europe.

www.meditecheurope.nl



4 Opis techniczny

4.1 Zestawienie

Urządzenie Swing Zapper wytwarza częstotliwości.

4.2 Tabliczka znamionowa



Rys. 4.2 Tabliczka znamionowa

Dostawca	: Meditech Europe B.V.
Dane	: Model i moc
Numer serii	: Unikalny na partię



5 Transport

Z urządzenia Swing Zapper należy korzystać w sposób ostrożny.

5.1 Przed transportem

Przed transportem lub odbiorem urządzenia Swing Zapper zostaje ono starannie zapakowane przez Meditech Europe.

5.2 Transport urządzenia

Urządzenie Swing Zapper należy transportować w zabezpieczonym opakowaniu.

5.3 Wypakowywanie urządzenia

Urządzenie Swing Zapper należy rozpakowywać ostrożnie, nie korzystając przy tym z ostrych narzędzi. Uważaj, aby nie upuścić produktu, jest on bardzo delikatny.



6 Obsługa urządzenia

6.1 Obsługa urządzenia

Umieść 2 baterie AA.

Podłącz elektrody rurkowe/płytkowe do urządzenia Swing Zapper za pomocą przewodów (lewego czerwonego i prawego czarnego).

Umieść urządzenie Swing Zapper na stabilnej, suchej i niezbyt śliskiej powierzchni.

1. Umieść elektrody rurkowe/płytkowe we właściwej pozycji i naciśnij przycisk ON.
2. Jeśli kontrolka miga, urządzenie Swing Zapper jest gotowe do pracy.
3. Urządzenie Swing Zapper automatycznie uruchamia siedmiominutowy program.
4. Po siedmiu minutach automatycznie się wyłącza.

Należy następnie odczekać 20 minut.

Po 20 minutach ponownie wykonaj kroki 1 + 2 + 3 + 4.

Następnie ponownie zrób 20-minutową przerwę.

Po raz trzeci wykonaj kroki 1 + 2 + 3 + 4.

Po trzecim razie program jest zakończony.

Początkowo powtarzaj go każdego dnia. Po tygodniu można zmienić częstotliwość na co drugi dzień.

6.2 Wymiana baterii

Otwórz pokrywę z tyłu urządzenia Swing Zapper i wymień baterie. Sprawdź, czy baterie umieszczono prawidłowo, a styki + i - są odpowiednio ustawione. Załóż ponownie pokrywę.



7 Wsparcie w przypadku zakłóceń

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale 6, można je zresetować. Wyjmij baterie z urządzenia i rozpocznij ponownie, wykonując kroki opisane w rozdziale 6.



8 Wycofanie z użytku

8.1 Utylizacja i recykling

W celu utylizacji i recyklingu urządzenia Swing Zapper skontaktuj się z Meditech Europe. Meditech Europe z przyjemnością przyjmie wszystkie produkty w celu ich utylizacji i recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

W celu samodzielnej utylizacji produktu skontaktuj się z jednostką władz lokalnych.



9 Gwarancja

Meditech Europe udziela 2-letniej gwarancji na urządzenie Swing Zapper.

Otwarcie urządzenia przez osobę inną niż wykwalifikowany pracownik Meditech Europe lub jego nieprawidłowe użytkowanie skutkują unieważnieniem gwarancji.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie, nieprawidłowe użytkowanie lub jakiegokolwiek szkody wynikłe z użytkowania w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.

Adres serwisu

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Holandia

Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 Deklaracja zgodności CE

 Meditech Europe		
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE		
Niniejsza deklaracja wydawana jest na pełną odpowiedzialność producenta.		
PRODUCENT		
Nazwa firmy :	Meditech Europe	
Pełny adres:	Daalder 14	
Kod pocztowy:	8305 BE	
Miejscowość:	Emmeloord	
Kraj:	Holandia	
Osoba upoważniona do sporządzania dokumentacji technicznej:	Pani J. Kraaij / Dyrektor operacyjny	
OPIS I IDENTYFIKACJA MASZYN		
Nazwa rodzajowa:	Swing Zapper	
Funkcja:	Swing Zapper to urządzenie wytwarzające częstotliwości.	
Rodzaj :	500060	
Nazwa handlowa:	Swing Zapper	
ZGODNOŚĆ		
<i>Producent oświadcza, że powyższe urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami</i>		
Dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy delegowanej (UE) 2015/863		
Jak również zastosowano poniższe normy zharmonizowane oraz w określonych przypadkach, normy i specyfikacje techniczne		
EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 /A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 /AC:2016		
Miejscowość:	Emmeloord Holandia	Nazwisko: Pan R. Frankhuisen Stanowisko: Właściciel
Data:	1 lutego 2024 r.	Podpis:
		