




Meditech Europe

Mode d'emploi

Swing Zapper (Base / Complet / Pulse)

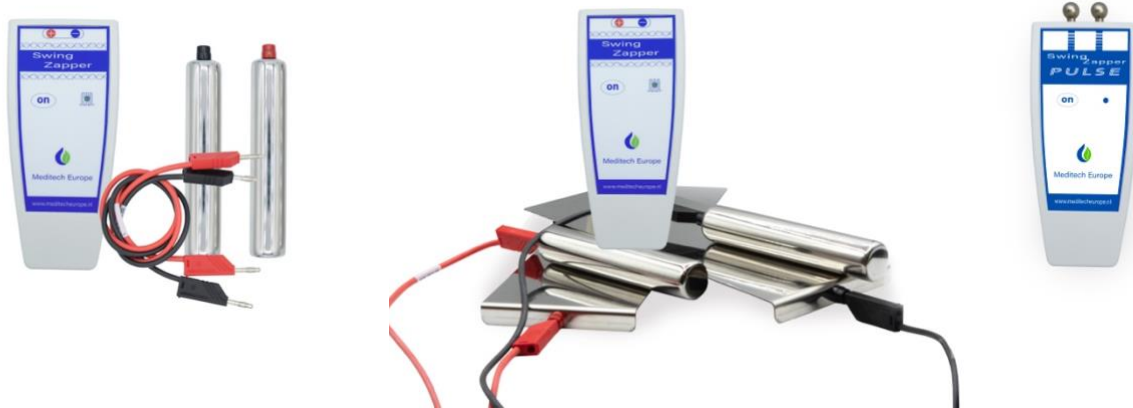



Meditech Europe

Live in Harmony

Données de projet

: Juillet 2025

Dénomination commerciale

: Meditech Europe B.V.

Nom du produit

: Swing Zapper

Type

: Base, Complet, Pulse

Puissance

: 3 V (2x pile 1,5 V)

Fabricant

: Meditech Europe B.V.

Auteur

: J.K

Adresse

: Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Pays-Bas
Téléphone : 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl

TVA NL859592480B01

Index de révision

: V3

Date de révision

: 2025/07



Table des matières

1	À propos du présent Mode d'emploi.....	5
1.1	Généralités	5
1.2	Symboles d'avertissement	5
2	Règles générales de sécurité.....	6
2.1	Principes	6
2.2	Utilisation prévue	6
2.3	Sélection et qualification du personnel	6
2.4	Règles de sécurité.....	7
2.5	Mesures en cas d'urgence	7
3	Contenu de la livraison.....	8
4	Description technique.....	9
4.1	Aperçu.....	9
4.2	Plaque signalétique	9
5	Transport.....	10
5.1	Avant le transport	10
5.2	Transport de l'appareil.....	10
5.3	Déballage de l'appareil	10
6	Commande de l'appareil	11
6.1	Commande de l'appareil	11
6.2	Remplacement des piles	11
7	Assistance en cas de panne	12
8	Mise hors service	13
8.1	Élimination et recyclage	13



9	Garantie	14
10	Déclaration CE de conformité.....	15



1 À propos du présent Mode d'emploi

Le présent Mode d'emploi doit être lu avant la première utilisation du Swing Zapper ou lorsqu'il fait l'objet de travaux par un technicien autorisé. Pour des questions, contactez Meditech Europe.

En particulier, respectez scrupuleusement le chapitre 2 « Règles générales de sécurité ».

1.1 Généralités

Les instructions dans le présent manuel sont destinées à vous familiariser avec le Swing Zapper et à vous permettre d'utiliser les fonctions de l'appareil de manière optimale.

Le Mode d'emploi contient des remarques importantes pour la commande et l'utilisation sûres et correctes du Swing Zapper. Cela contribue à :

- Éviter les dangers
- Éviter les coûts de réparation et les pannes de l'appareil
- Augmenter la fiabilité et la durée de vie du produit

Ces instructions doivent être lues et appliquées par chaque personne autorisée à réaliser des travaux sur le Swing Zapper et qui a plus de 18 ans.

Outre le présent mode d'emploi, il faut également observer les règles relatives à la prévention des accidents et à la protection de l'environnement en vigueur dans le pays et sur le lieu d'utilisation en question.

1.2 Symboles d'avertissement



Rayonnements non ionisants

Cela signifie que l'appareil émet un rayonnement à faible énergie d'ondes radio et de radiofréquences.



2 Règles générales de sécurité

2.1 Principes

Contactez toujours Meditech Europe en cas de doute.

N'ouvrez pas le Swing Zapper. Cette opération peut être réalisée exclusivement par un spécialiste de Meditech Europe. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert par d'autres personnes que des spécialistes de Meditech Europe.

N'utilisez jamais le Swing Zapper dans des pièces humides, telles que salles de bains. Évitez la chaleur et le froid.

Le Swing Zapper est un appareil qui crée des fréquences. Ce n'est pas un dispositif médical. L'utilisation du Swing Zapper n'ouvre aucun droit, et aucune requête ne peut être introduite à la suite de son utilisation. L'utilisation du Swing Zapper se fait entièrement aux risques et périls de l'utilisateur.

Nettoyage du Swing Zapper : utilisez un chiffon sec. Un chiffon humide peut être utilisé pour les taches tenaces. Veillez à ce que le porte-piles ne soit pas humide.

En cas de doute sur l'utilisation du Swing Zapper, contactez toujours Meditech Europe au numéro de téléphone suivant : 0031 (0)527 292331 ou par e-mail : info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe n'assume aucune responsabilité pour une utilisation abusive, incorrecte ou pour tout dommage causé par une utilisation différente de celle décrite dans le présent manuel. Tout litige est régi par le droit néerlandais.

2.2 Utilisation prévue

Le Swing Zapper est un appareil qui crée des fréquences.

2.3 Sélection et qualification du personnel

Le Swing Zapper a été fabriqué pour Meditech Europe à Emmeloord (NL). Meditech Europe a recours exclusivement à des fabricants compétents et certifiés.



2.4 Règles de sécurité

N'utilisez pas le Swing Zapper si vous êtes enceinte. N'utilisez pas non plus le Swing Zapper si vous avez un pacemaker, un défibrillateur automatique implantable (DAI) ou une pompe à insuline.

Utilisez le Swing Zapper toujours dans un espace sec.

Veillez à ce que le Swing Zapper n'entre pas en contact avec des sources de chaleur, telles que foyers, poêles à gaz, feux nus, etc.

S'il est endommagé, le produit doit être réparé par Meditech Europe.

2.5 Mesures en cas d'urgence

Un extincteur adapté aux appareils électroniques doit être utilisé en cas d'incendie.



3 Contenu de la livraison

1x Swing Zapper

Existe dans plusieurs types. Des images des différents types figurent sur le site Web de Meditech Europe.

www.meditech europe.nl



4 Description technique

4.1 Aperçu

Le Swing Zapper crée des fréquences.

4.2 Plaque signalétique



Fig. 4.2 Plaque signalétique

Fournisseur	: Meditech Europe B.V.
Données	: Type et puissance
Numéro de lot	: Unique par lot



5 Transport

Le Swing Zapper doit être manipulé avec soin.

5.1 Avant le transport

Meditech Europe emballe soigneusement le Swing Zapper pour son transport ou son retrait.

5.2 Transport de l'appareil

Le Swing Zapper doit être transporté dans l'emballage protégé.

5.3 Déballage de l'appareil

Le Swing Zapper doit être déballé soigneusement, sans utiliser d'outils tranchants. Ne laissez pas tomber l'appareil, car il est fragile.



6 Commande de l'appareil

6.1 Commande de l'appareil

Insérez 2 piles AA.

Branchez les électrodes enrobées/à plaque sur le Swing Zapper au moyen des câbles (rouge à gauche et noir à droite).

Placez le Swing Zapper sur un support stable, sec et pas trop lisse.

1. Positionnez correctement les électrodes enrobées/à plaque, puis appuyez sur ON.
2. Lorsque le témoin clignote, le Swing Zapper est en marche.
3. Le Swing Zapper exécute automatiquement un programme de sept minutes.
4. Au bout de sept minutes, il s'éteint automatiquement.

Ensuite, il faut attendre 20 minutes.

Au bout de 20 minutes, recommencez les étapes 1 + 2 + 3 + 4.

Ensuite, faites à nouveau une pause de 20 minutes.

Recommencez pour la troisième fois les étapes 1 + 2 + 3 + 4.

Après la troisième fois, le programme est terminé.

Répétez-le au début de chaque journée. Au bout d'une semaine, vous pouvez réduire la fréquence à un jour sur deux.

6.2 Remplacement des piles

Ouvrez le couvercle au dos du Swing Zapper et remplacez les piles. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, avec le + et le - à la position correcte. Remettez en place le couvercle au dos.



7 Assistance en cas de panne

Si l'appareil ne fonctionne pas selon les étapes indiquées au chapitre 6, il peut être réinitialisé. Retirez les piles de l'appareil, puis suivez à nouveau les étapes indiquées au chapitre 6.



8 Mise hors service

8.1 Élimination et recyclage

Contactez Meditech Europe pour l'élimination et le recyclage du Swing Zapper. Meditech Europe se fait un plaisir de réceptionner tous les produits à des fins d'élimination et de recyclage en conformité avec les règles environnementales.

Contactez les autorités locales si, en tant qu'utilisateur, vous voulez éliminer vous-même le produit.



9 Garantie

Meditech Europe accorde 2 ans de garantie sur le Swing Zapper.

La garantie est annulée si l'appareil est ouvert par d'autres personnes que des spécialistes de Meditech Europe, ou en cas d'utilisation incorrecte.

Meditech Europe n'assume aucune responsabilité pour une utilisation abusive, incorrecte ou pour tout dommage causé par une utilisation différente de celle décrite dans le présent manuel.

Adresse de service

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Pays-Bas

Téléphone : 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 Déclaration CE de conformité



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant

FABRICANT

Raison sociale :	Meditech Europe
Adresse complète :	Daalder 14
Code postal :	8305 BE
Ville :	Emmeloord
Pays :	Pays-Bas
Personne habilitée à composer le dossier technique :	Mme J. Kraaij / Directrice opérationnelle

DESCRIPTION ET IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Dénomination générique :	Swing Zapper
Fonction :	Le Swing Zapper est un appareil qui crée des fréquences.
Type :	500060
Dénomination commerciale :	Swing Zapper

CONFORMITÉ

Le fabricant déclare que la machine ci-dessus répond à toutes les dispositions des directives suivantes :

Directive « Basse tension » 2014/35/UE
Directive « Compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE et directive déléguée (UE) 2015/863

☐ OÙ LES NORMES HARMONISÉES ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES NORMES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SUIVANTES SONT APPLIQUÉES

EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 / A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 / AC:2016

Ville :	Emmeloord	Nom :	R. Frankhuisen
	Pays-Bas	Fonction :	Propriétaire
Date :	1er février 2024	Signature :	