




Meditech Europe

Kullanım Kılavuzu

Swing Zapper (Temel / Komple / Darbeli)

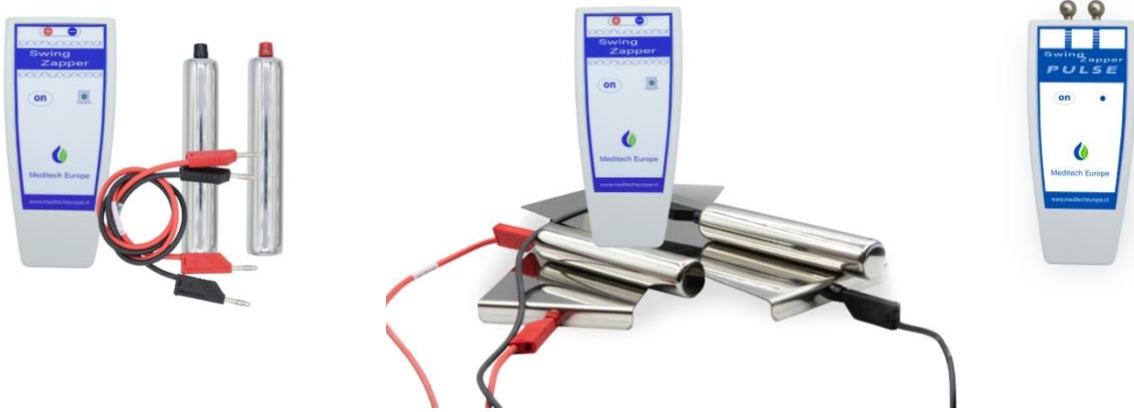



Meditech Europe

Live in Harmony

Proje bilgileri	: Temmuz 2025
Ticarî adı	: Meditech Europe B.V.
Ürün adı	: Swing Zapper
Tip	: Temel, Komple, Darbeli
Kapasite	: 3 V (2x 1,5 V pil)
Üretici	: Meditech Europe B.V.
Yazar	: J.K
Adres	: Daalder 14 8305 BE Emmeloord Hollanda Telefon: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl KDV no: NL859592480B01
Revizyon-indeks	: V3
Revizyon tarihi	: 2025/07



İçindekiler

1	Bu Kullanım Kılavuzu hakkında.....	5
1.1	Genel	5
1.2	Uyarı işaretleri	5
2	Genel Güvenlik Talimatları	6
2.1	Prensipeler.....	6
2.2	Kullanım amacı	6
2.3	Personelin seçimi ve kalitesi	6
2.4	Güvenlik Talimatları.....	7
2.5	Acil durum önlemleri	7
3	Teslimat kapsamı.....	8
4	Teknik açıklama	9
4.1	Özet	9
4.2	Tip resmi	9
5	Nakliye	10
5.1	Nakliye öncesinde	10
5.2	Cihazın nakliyesi.....	10
5.3	Cihaz paketinin açılması	10
6	Cihazın kullanımı	11
6.1	Cihazın kullanımı	11
6.2	Pillerin değişimi.....	11
7	Arızalarda yardım	12
8	Hizmet dışı bırakma.....	13
8.1	İmha ve geri kazanım	13



9	Garanti	14
10	Avrupa Birliđi Uygunluk Beyanı	15



1 Bu Kullanım Kılavuzu hakkında

Bu kullanım kılavuzu Swing Zapper'ın ilk kullanımından önce ya da yetkili montör olarak optimizatör üzerinde işlem yapılacağı zaman okunmalıdır. Sorularınız olursa, Meditech Europe ile iletişime geçiniz.

Özellikle Bölüm "Genel Güvenlik Talimatları"nı dikkatli bir şekilde okuyunuz.

1.1 Genel

Bu kılavuzdaki talimatlar, sizi Swing Zapper'a alıştırmak ve cihazın işlevlerinden tam olarak yararlanabilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanım kılavuzu, Swing Zapper'ın güvenli ve doğru kullanımı için önemli bilgiler içermektedir. Kılavuz, aşağıdaki yönlerden önemlidir:

- Tehlikelerin önlenmesi
- Cihazın onarım masrafları ile arızalarının önlenmesi
- Ürünün güvenilirliği ile ömrünün artırılması

Bu talimatlar, Swing Zapper üzerinde çalışma yapmaya yetkili ve 18 yaşın üzerindeki kişiler tarafından okunmalı ve uygulanmalıdır.

Bu kullanım kılavuzunun yanı sıra, kullanım yapılan ilgili ülkede ve uygulama yerinde geçerli olan kaza önleme ve çevre koruma yönetmeliklerine de uyulmalıdır.

1.2 Uyarı işaretleri



İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

Bu, cihazın düşük enerjili radyo dalgaları ve radyo frekansları yaydığı anlamına gelir.



2 Genel Güvenlik Talimatları

2.1 Prensipler

Emin olmadığınız durumlarda, Meditech Europe ile iletişime geçiniz.

Swing Zapper'ı açmayınız. Bu, sadece Meditech Europe uzmanı tarafından yapılabilir. Cihazın Meditech Europe uzmanları dışında başka biri tarafından açılması durumunda garanti geçerli olmaz.

Swing Zapper'ı asla banyo gibi nemli alanlarda kullanmayınız. Isı ve soğuktan uzak tutunuz.

Swing Zapper, frekans yaratan bir cihazdır. Tıbbî yardımcı malzeme değildir. Swing Zapper kullanımından hiçbir hak elde edilemez ve kullanımından dolayı hak talebinde bulunulamaz. Swing Zapper'ın kullanım riski ve masrafları tamamen kullanıcıya aittir.

Swing Zapper'ın temizliği: kuru bir bez kullanınız. İnatçı lekeler için nemli bir bez kullanılabilir. Pil yerinin ıslanmamasına dikkat ediniz.

Swing Zapper kullanımı ile ilgili emin olmadığınız durumlarda her zaman Meditech Europe BV ile iletişime geçiniz:
Tel: 0031 (0)527 292331 ya da e-posta: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe, suistimal, hatalı kullanım veya bu kılavuzda belirtilen şekilde olmayan kullanımlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Anlaşmazlık durumunda Hollanda yasaları geçerlidir.

2.2 Kullanım amacı

Swing Zapper, frekans yaratan bir cihazdır.

2.3 Personelin seçimi ve kalitesi

Swing Zapper, Meditech Europe için Emmeloord'da (NL) üretilmektedir. Meditech Europe, sadece teknik açıdan bilgili ve sertifikalı üreticilerle çalışmaktadır.



2.4 Güvenlik Talimatları

Hamile iseniz, Swing Zapper'ı kullanmayın. Aynı zamanda kalp piliniz, implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD) ya da insülin pompanız var ise, Swing Zapper'ı kullanmayın.

Swing Zapper'ı her zaman kuru alanda kullanınız.

Swing Zapper'ın şömine, gaz sobası, açık ateş gibi ısı kaynaklarıyla temas etmemesine dikkat ediniz.

Ürün zarar görürse, Meditech Europe tarafından tamir edilmelidir.

2.5 Acil durum önlemleri

Yangın çıkarsa, elektronik cihazlara uygun olan bir yangın söndürücü kullanılmalıdır.



3 Teslimat kapsamı

1x Swing Zapper

Farklı türleri vardır. Meditech Europe internet sitesinde farklı türleri gösteren fotoğraflar yer almaktadır.

www.meditecheurope.nl



4 Teknik açıklama

4.1 Özet

Swing Zapper frekanslar yaratır.

4.2 Tip resmi



Şekil 4.2 Tip resmi

Tedarikçi	: Meditech Europe B.V.
Bilgiler	: Tip ve kapasite
Parti numarası	: Her parti özgün



5 Nakliye

Swing Zapper'a gereken dikkat gösterilmelidir.

5.1 Nakliye öncesinde

Meditech Europe, Swing Zapper nakliye edileceği ya da teslim alınacağı zaman dikkatli bir şekilde ambalajlamaktadır.

5.2 Cihazın nakliyesi

Swing Zapper, korumalı bir ambalaj içinde nakil edilmelidir.

5.3 Cihaz paketinin açılması

Swing Zapper, keskin aletler kullanılmadan dikkatlice ambalajından çıkarılmalıdır. Cihazı düşürmeyiniz, hasar görebilir.



6 Cihazın kullanımı

6.1 Cihazın kullanımı

2 adet AA pil yerleştirin.

Çubuk/plaka elektrotları kabloları kullanarak Swing Zapper'a bağlayın (kırmızı sol ve siyah sağ).

Swing Zapper'ı stabil, kuru ve kaygan olmayan bir zemine yerleştirin.

1. Çubuk/plaka elektrotları doğru pozisyona getirin ve On'a (aç) basın.
2. Lamba yanıp sönmeye başladığında, Swing Zapper çalışmaktadır.
3. Swing Zapper otomatik olarak yedi dakikalık bir programda çalışır.
4. Yedi dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Bundan sonra 20 dakika beklenmelidir.

20 dakika sonra yeniden 1 + 2 + 3 + 4 adımlarını uygulamaya başlayın.

Daha sonra 20 dakika daha ara verin.

Üçüncü kez 1 + 2 + 3 + 4 adımlarını uygulamaya başlayın.

Üçüncü seferden sonra program tamamlanır.

Bu işlemi her günün başlangıcında tekrarlayın. Bir hafta sonra işlem gūnaşırı uygulanabilir.

6.2 Pillerin deęiřimi

Swing Zapper'ın arkasındaki kapaęı açın ve pilleri deęiřtirin. Pilin doęru yerleřtirilip yerleřtirilmedięini ve + ile - kutupların doęru pozisyonda olup olmadıęını kontrol edin. Arka kapaęı kapatın.



7 Arızalarda yardım

Cihaz Bölüm 6’da belirtilen adımlara uygun olarak çalışmıyorsa, sıfırlanabilir. Pilleri cihazdan çıkarın, Bölüm 6’da belirtilen adımları yeniden uygulamaya başlayın.



8 Hizmet dışı bırakma

8.1 İmha ve geri kazanım

Swing Zapper'ın imhası ve geri dönüşümü için Meditech Europe ile iletişime geçiniz. Meditech Europe, tüm ürünlerini çevre yönetmeliklerine uygun olarak imha edeceğini ya da geri dönüşüme kazandıracağını kabul etmektedir.

Ürünü kullanıcı olarak kendiniz imha etmek istediğinizde, yetkili yerel kurumlarla iletişime geçiniz.



9 Garanti

Meditech Europe, Swing Zapper için 2 yıl garanti vermektedir.

Cihazın Meditech Europe uzmanları dışında başka biri tarafından açılması ya da yanlış kullanımı durumunda garanti geçerli olmaz

Meditech Europe, suistimal, hatalı kullanım veya bu kılavuzda belirtilen şekilde olmayan kullanımlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Servis adresi

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Hollanda

Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 Avrupa Birliđi Uygunluk Beyanı

 Meditech Europe	
AVRUPA BİRLİĐİ UYGUNLUK BEYANI	
Bu beyan tamamen üreticinin sorumluluđu altında verilmiştir	
FAKTÖR	
Şirket adı:	Meditech Europe
Tam adres:	Daalder 14
Posta kodu:	8305 BE
Yer:	Emmeloord
Ülke:	Hollanda
Teknik dosyayı derlemeye yetkili kişi:	Bayan. J. Kraaij / Operasyon Direktörü
MAKİNEİN TANIMI VE TANIMLANMASI	
Jenerik adı:	Swing Zapper
İşlevi:	Swing Zapper, frekanslar oluşturan bir cihazdır. frekanslarını oluşturur.
Tip:	500060
Ticari adı:	Swing Zapper
SÖZLEŞME	
☐ İmalatçı, yukarıdaki makinenin aşağıdakilerin geçerli tüm hükümlerine uygun olduğunu beyan eder	
RoHS Direktifi 01 1/65/EU & Yetkilendirilmiş Direktif (AB) 2015/863	
Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar ve uygun olan yerlerde teknik standartlar ve şartnameler kullanılmıştır	
EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 / A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 / AC:2016	
Yer:	Emmeloord Hollanda
İsim:	Bay R. Frankhuisen
Pozisyon:	Sahibi
Tarih:	1 Şubat 2024
İmza:	